

gaius

SVANCARE[®]

- A PART OF **AddLife**[®]

Utvalda produkter från Gaius,
för installation i befintliga badrum.





Gaius-produkter för installation i befintliga badrum.

Här följer ett utdrag ur det rikliga sortiment av produkter som finns i Gaius. Dessa varor är lämpliga att välja för installation i befintliga badrum, när man vill anpassa för tillgänglighet.

Vi lagerhåller detta mindre sortiment. Övrigt sortiment av Gaius har längre leveranstid.

Av samtliga produkter i detta sortiment, är lackade-, målade- och elastomerytor antimicrobiella, d.v.s. tar död på 99,9 % av alla bakterier och är effektiv mot svampar, mögelsporer och många virus.

ARMSTÖD

VÄGGFASTA WC-ARMSTÖD

Vi har här valt ut 3 st modeller som alla passar i längd till golvstående wc-porslin.

Gaius Stay WC-armstöd

Gaius Stay WC-armstöd är ett klassiskt pålitligt armstöd som har en ergonomisk design och en hållbar och kraftig konstruktion. Stommen av stål är pulverlackad med epoxifärg och försedd med en greppyta av elastomer. WC-armstödet väggmonterade delar är av aluminium. Armstödet kan fällas upp och stannar kvar i uppfällt läge. Maxbelastning 150 kg. Skruvkit, art.nr G20064-Z, behöver beställas separat.



GAIUS STAY WC-ARMSTÖD MED STÖDBEN.

Den här varianten har ett stödben, det lämpar sig bra vid renovering eller efterinstallation där väggens konstruktion inte är tillräckligt stark eller det är svårt att förstärka väggen.

Grepphöjd 800 mm från golv.

Längd 800mm med stödben, Grå

ART. NR. G10102GAM



GAIUS STAY WC-ARMSTÖD, VÄGGMONTERAT MED HÖJDJUSTERING.

Höjdjustering med skruvar, 0-200mm.

Längd 820 mm höjdjusterbart, Grå.

ART. NR. G10113GAM

Tillbehör - Gaius Stay



**SKRUVKIT
STAY WC-ARMSTÖD**
6 st syrabeständiga
montageskruvar, vägg-
pluggar och täckhattar
ART. NR. G20064-Z



**GAIUS STAY
TOALETTPAPPERSHÅLLARE**
Tilläggsutrustning för Regal
WC-armstöd
ART. NR. G1756N

Gaius Regal Light WC-armstöd

Gaius Regal Light WC-armstöd är både ergonomiskt utformat och funktionellt. Det har en smart avlastningsmekanism som gör armstödet både lätt att fälla upp samtidigt som armstödet stannar kvar i uppfälld position utan separat låsmekanism.

Gaius Regal armstöd är godkänd för vertikal belastning upp till 250 kg per armstöd och även en horisontell belastning på 150 kg. Praktiskt vid sittande förflyttning från tex rullstol till toalett, vid fall mot WC-armstöden eller i de fall WC-armstödet används vid uppresning från sidan, tex. en intilliggande duschplats. Materialet är lackerat rostfritt stål och greppytor är i elastomer. Skruvkit, art.nr G 6209S, behöver beställas separat.



GAIUS REGAL LIGHT WC-ARMSTÖD, VÄGGMONTERAT.

Längd 780mm, Grå

ART. NR. G330005GAM

Tillbehör - Gaius Regal Light



**SKRUVKIT
REGAL WC-ARMSTÖD**
4 syrabeständiga försänkta
montageskruvar
och väggpluggar.
ART. NR. G6209S



**GAIUS REGAL
TOALETTPAPPERSHÅLLARE**
Tilläggsutrustning för Regal
WC-armstöd
ART. NR. G1721

Tillbehör - Gaius Stay och Gaius Regal Light

GAIUS BRÖSTSTÖD*, Grå
Art. nr. G20120

För ett självständigt, säkert och tryggt toalettbesök kan Gaius Bröststöd användas tillsammans med Gaius WC-armstöd. Gaius Bröststöd hakas fast mellan armstöden och låser sig på plats när man lutar sig framåt. Bröststödet kan inte bara användas framför brukaren som säkerhet utan även bakom som extra stöd bakom ryggen. Justerbart i bredd.

*Passar både Stay och Regal



STÖDHANDTAG

Stödhandtag Gaius Modular, rakt.

Den ovala profilen på Gaius Modular stödhandtag ger ett stadigt och naturligt grepp. Väggfästen i vit polykarbonat, stödhandtagets lackerade profilrör är i aluminium, levereras inklusive skruvar. Skruvfästningarna är dolda bakom ett gummiskydd.

Stödhandtagets belastningsförmåga är 150 kg. Rörets profil är oval, 33 x 30 mm i diameter.

Lacken innehåller även Gaius unika antimikrobiska ytskikt som har bevisad effekt mot både bakterier, mögel, svamp och många virus.



1. GAIUS MODULAR STÖDHANDTAG
450 mm, grå

ART. NR. G16211G




2. GAIUS MODULAR STÖDHANDTAG
550 mm, grå

ART. NR. G16222G



3. GAIUS MODULAR STÖDHANDTAG
700 mm, grå

ART. NR. G16255G

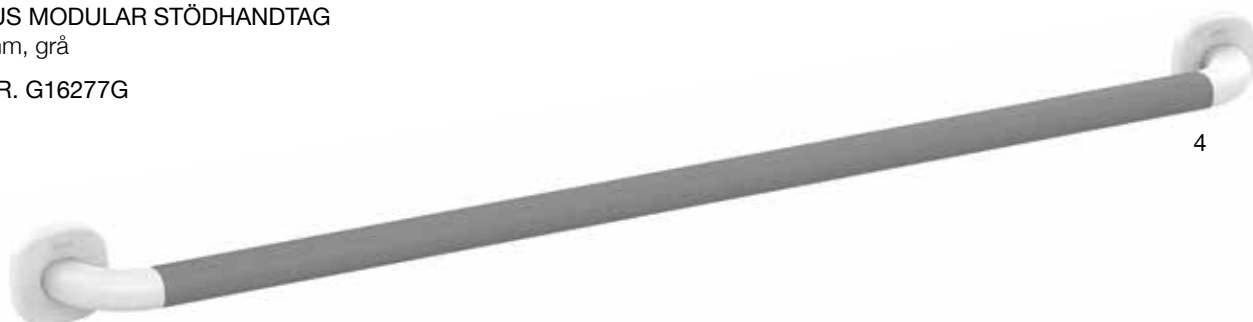

4. GAIUS MODULAR STÖDHANDTAG
1000 mm, grå

ART. NR. G16277G



TVÄTTSTÄLL

Dessa båda tvättställ från Gaius har vi valt ut med tanken att kunna eftermontera i badrum. De är försedda med handtag för stöd och trygghet vid

uppresning och förflyttning. Båda kan även förses med höjdjustering, manuell eller med el.

Gaius Senior Tvättställ



Gaius Senior tvättställ passar bra för hemmabruk. Tvättställets fasta stödhandtag ger stöd vid tvättstället och när man reser sig upp från toalettstolen. De håller för en tyngd på ca 240 kg. Stödhandtaget har en kontrastfärg i grått som gör det enklare att se tvättställets kant. Tvättstället är tillverkat av gjutmarmor som är ett hygieniskt, lättskött och hållbart material. Stödhandtaget är målat och tillverkat i aluminium.

Rekommenderad installationshöjd ca 800 mm vid fast höjd och ca 700-900 mm med höjdjustering.

GAIUS SENIOR TVÄTTSTÄLL 600

Vit, grått stödhandtag.

Mått: B 600 mm x D 443 mm (513 mm till stödhandtagets ytterkant). Levereras med bakförskjutet vattenlås och konsoler för montering av tvättstället i fast höjd. OBS! Skruvkit art. nr G6218-Z behöver beställas separat.

ART. NR. G6401GAM



SKRUVKIT

Skruvkit för Gaius Senior tvättställ innehåller 8 st skruvar. 1 pack per tvättställ.

ART. NR. G6218-Z

Gaius Royal Tvättställ



GAIUS ROYAL TVÄTTSTÄLL

Vit. Mått: B 600 mm x D 600 mm
x H 180 mm. För fast montering.
Skruvar och vattenlås ingår.

ART. NR. G622712WAM

Gaius Royal tvättställ har unika funktioner kombinerat med generös storlek. Designen tar särskilda hänsyn för optimal tillgänglighet samtidigt som det erbjuder samma generösa utrymme för hygiengöromål som ett standardtvättställ. Tvättstället är tillverkat av gjutmarmor som är ett hygieniskt, lättskött och hållbart material.

Gaius Royal Tvättställ erbjuder gott om benutrymme för sittande användning genom sitt djup på 60 cm. Den insvängda

framkanten gör det enkelt för användaren att komma nära. Avståndet från tvättställets framkant till vattenstrålen och blandarreglaget understiger 300 mm, vilket bidrar till god tillgänglighet.

De ingjutna stödhandtagen förenklar uppresning eller förflyttning i tvättställets närhet. Lutningen på tvättställets kanter gör att vattenstänk rinner ner i handfatet.



Tilläggsutrustning för både Gaius Senior och Gaius Royal tvättställ



ELEKTRISK HÖJDJUSTERING TILL GAIUS SENIOR
OCH GAIUS ROYAL TVÄTTSTÄLL.

TILL GAIUS SENIOR TVÄTTSTÄLL: ART. NR. G6514.4

TILL GAIUS ROYAL TVÄTTSTÄLL: ART. NR. G65113.4

Rekommenderad justeringshöjd 700-900 mm över golv.
Flexirör art. nr. G13982 rekommenderas.

OBS! Skruvkit art. nr. 6208-Z behövs, beställs separat.



HÖJDJUSTERINGSSKENOR FÖR GAIUS
SENIOR TVÄTTSTÄLL OCH GAIUS
ROYAL TVÄTTSTÄLL.

TILL GAIUS SENIOR TVÄTTSTÄLL:
ART. NR. G6232W OBS! 1 STYCK/FÖRPACKING

TILL GAIUS ROYAL TVÄTTSTÄLL:
ART. NR. G6233W OBS! 2 STYCK/FÖRPACKING

För att i efterhand kunna justera fast höjd. 2 st skenor
behövs per tvättställ. Rekommenderad justeringshöjd
700-900 mm över golv. Teleskopavloppsrör art. nr. X300
rekommenderas. OBS! 2 st Skruvkit per tvättställ behövs
art. nr G20064-Z, beställs separat.



SKRUVKIT

Skruvkit för höjdjusterbara Gaius Regal armstöd samt
elektrisk höjdjustering för tvättställ. Innehåller 6 st syra-
fasta skruvar, brickor och täckhattar. Ett paket räcker
till ett tvättställ eller ett armstöd.

ART. NR. G6208-Z



SKRUVKIT

Skruvkit för höjdjusteringsskenor för tvättställ
samt till Gaius Stay WC-armstöd.
OBS! 2 paket behövs till ett tvättställ.

ART. NR. G20064-Z



GAIUS FLEXIBELT AVLOPPSRÖR.
Återfjädrande avloppsslang till elektriskt
höj- och sänkbara tvättställ.

ART. NR. G13982



GAIUS TELESKOPAVLOPPSRÖR
för tvättställ med höjdregleringsskenor

ART. NR. GX300



Vi bygger framtidens badrum

Se mer ur vårt sortiment på www.svancare.se



BIDETTE R3

Bidétillsats till toaletten med tvätt och torkfunktion



LIFT

Höj och sänkbar toaletsits



GRIPO ALU

Stödstång för hjälp med uppresning




BALANCE

Flexibelt system för toaletten som ger extra stöd för barn och vuxna



GAIUS SENIOR TVÄTTSTÄLL

Tvättställ med stödhandtag. Går även att få höj och sänkbart.

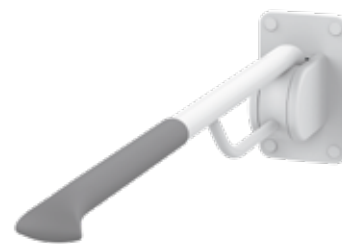

GAIUS REGAL

Väggmonterade, uppfällbara WC-armstöd.